

# Software para el Espectrofotómetro MiniScan XE Plus usado en el Diagnóstico de Patologías Dermatológicas en Pacientes

Gabriel Núñez<sup>\*,§,¶</sup>, Harold Vasquez<sup>\*,§</sup>, Patricia Guerrero<sup>\*,§</sup>, y Aarón Muñoz<sup>†,‡,§</sup>

<sup>\*</sup>Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, Departamento de Computación

<sup>†</sup>Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, Departamento de Física

<sup>‡</sup>Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo

<sup>§</sup>Universidad de Carabobo, Nguanagua – Edo. Carabobo, Venezuela

<sup>¶</sup>Email: gabriel.nzn@gmail.com

**Resumen**—El espectrofotómetro de reflexión difusa, denominado MiniScan XE Plus, es un instrumento de medición utilizado por el Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC), que ayuda a los dermatólogos a establecer diagnósticos sobre patologías en la piel de pacientes, de manera precisa y sin necesidad de realizar biopsias. No obstante, el software disponible para la utilización de tal instrumento es poco amigable, difícil de utilizar e imposible de modificar y extender. La presente investigación, aún en avance, tiene como objetivo desarrollar un software amigable, modificable y extensible, que se ajuste a las necesidades de los dermatólogos, para así garantizar un mejor aprovechamiento del instrumento en cuestión.

## I. INTRODUCCIÓN

Durante el diagnóstico de enfermedades en la piel, la observación cuidadosa y la evaluación visual del área sospechada es siempre el primer paso, y el más importante. La observación visual suele ser subjetiva, por otro lado las técnicas ópticas son a menudo objetivas [1].

La Espectroscopía de Reflectancia Difusa (ERD) es una técnica óptica con la cual es posible estudiar las propiedades bioquímicas y las condiciones estructurales de un tejido biológico, analizando la interacción luz-tejido de una manera no invasiva [2]. Los instrumentos que emplean técnicas como la ERD son de gran ayuda para los dermatólogos, razón por la cual tales instrumentos han tomado suma importancia en el área de la medicina dermatológica.

En este sentido, el Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC) dispone de un espectrofotómetro de reflexión difusa denominado MiniScan XE Plus, creado por la empresa HunterLab [3]. El CIMBUC hace uso de este instrumento a través del único software disponible para su utilización, designado HunterLab Universal Software (HLUS) [4].

El HLUS es un software comercial y privativo que fue discontinuado en el año 2008, el cual solo puede ejecutarse en sistemas operativos Windows que ya son obsoletos. Su interfaz gráfica de usuario está en inglés y contiene más funciones de las necesarias para manejar el instrumento en estudio, lo que lo hace poco amigable y difícil de entender por los dermatólogos. También debido a que los resultados generados por dicho

software no poseen el formato con el que ellos trabajan, es necesaria la exportación manual de los mismos. Todo esto genera la necesidad de asistencia técnica especializada para su debida utilización, ralentiza las consultas con los pacientes y disminuye el potencial del instrumento en estudio.

Ahora bien, los productos de software tienen cierto número de atributos asociados que reflejan su calidad, los cuales se resumen en mantenibilidad, confiabilidad, eficiencia y usabilidad [5]. Debido a que el HLUS es privativo, su código fuente no está disponible, de manera que este software no puede ser modificado ni adaptado a necesidades específicas, y por lo tanto, no posee el primer atributo esencial para un software de calidad: la mantenibilidad. Por la misma razón, no se puede determinar con certidumbre el segundo atributo: la confiabilidad (madurez del software, nivel de seguridad y tolerancia a fallas). Por último, la usabilidad de este software es baja, ya que la interfaz gráfica de usuario es poco amigable.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado previamente y siguiendo los lineamientos de calidad del software que se consideran pertinentes, se está desarrollando un software amigable, modificable y extensible. Este va a ofrecer las funciones que necesitan los dermatólogos para manejar el MiniScan XE Plus, realizar análisis y establecer diagnósticos de patologías en pacientes, empleará el formato con el que trabajan, y permitirá exportar los resultados en un archivo portátil.

Por último, se está creando un software sobre el cual se podrán desarrollar nuevas investigaciones, que conlleven a la implementación de técnicas que empleen análisis más completos, y como resultado, diagnósticos más completos y diversos sobre patologías dermatológicas presentes en pacientes.

El presente artículo está organizado en cuatro secciones después de la introducción (sección I). En la sección II se explican conceptos que sustentan el desarrollo de las funciones que debe ofrecer el nuevo software. En la sección III se describen las metodologías que se están utilizando para llevar a cabo la investigación y el desarrollo del software. En la sección IV se detallan los recursos y las tecnologías utilizadas para el desarrollo del nuevo software. Finalmente, en la sección V se exponen los resultados obtenidos hasta el momento y las conclusiones.

## II. ANTECEDENTES

### II-A. Antecedentes de la investigación

1) *Índice de eritema*: es utilizado para determinar el nivel inflamatorio de la epidermis de un paciente. El método utilizado para calcular este índice [7] es implementado en el nuevo software.

2) *Coeficiente de absorción de la epidermis*: su objetivo es indicar el nivel de concentración de melanina presente en la epidermis de un paciente. La técnica empleada para calcular este coeficiente [8] es implementada en el nuevo software.

### II-B. Observación directa

1) *HunterLab Universal Software (HLUS)*: es un software comercial y privativo de 16 bits diseñado para el sistema operativo Microsoft Windows versión 3.x. Fue creado para la utilización del MiniScan XE Plus, además de otros instrumentos de la empresa HunterLab [4], y discontinuado en el año 2008. Algunas de las funciones de este software están siendo desarrolladas en el nuevo software, razón por la cual es una referencia importante de observación.

2) *Archivo MSXE + OCX*: es una hoja de cálculo habilitada para la ejecución de macroinstrucciones de Microsoft Excel, proporcionada por HunterLab [3] como un ejemplo para acceder a las características comunmente utilizadas por el MiniScan XE Plus. El código contenido en este archivo se está empleando como referencia.

### II-C. Bases teóricas

1) *Espectroscopía de reflectancia difusa*: también conocida como ERD, es una técnica con la cual se puede estudiar tejido biológico. En el campo de las aplicaciones biomédicas resulta útil para propósitos de diagnóstico, ya que se pueden estudiar tejidos de manera no invasiva [2].

2) *Absorbancia aparente*: el espectro de absorción es la luz que es absorbida por un medio [10]. La absorbancia aparente es la luz que no es re-emitida por el medio hacia la superficie irradiada, y que aparentemente está siendo absorbida.

3) *Iluminante estándar D65*: es un estándar desarrollado por la *Commission Internationale de l'Eclairage (CIE)* [6] para cuantificar la fuente de luz bajo la cual se observa un objeto. Su propósito es representar la luz de día promedio.

4) *Observador estándar de 10°*: es una función desarrollada por la *CIE* [6] en 1964 para estandarizar la percepción del ojo humano con respecto al color, teniéndose un campo de visión de 10°.

5) *Coordenadas de cromaticidad CIE xyz*: representan los valores triestímulo de un color, siguiendo el estándar establecido por la *CIE* en 1964 [6]. El procedimiento utilizado para calcular estas coordenadas [9] está siendo implementado en el nuevo software.

6) *Coordenadas del espacio CIELAB*: es un sistema definido por la *CIE* en 1976 [6] para transformar las coordenadas de cromaticidad *CIE xyz* y volverlas representables en un espacio de tres dimensiones. Las fórmulas definidas para el cálculo estas coordenadas [9] están siendo implementadas en el nuevo software, para determinar propiedades ópticas presentes en la piel de los pacientes.

## III. METODOLOGÍAS

### III-A. Investigación-Acción

Es un método de investigación que produce resultados altamente relevantes, debido a que se fundamenta en la acción práctica, dirigida a resolver un problema mientras se informa cuidadosamente sobre la teoría [11].

Las actividades de la investigación se están realizando según la representación más habitual de la Investigación-Acción, la cual es descrita en la tabla 1.

TABLA 1. Actividades del proyecto, según la Investigación-Acción

Fase	Actividades
<b>Diagnóstico</b>	Identificar los problemas y limitaciones que presenta el HLUS.
<b>Planificación</b>	Seleccionar la metodología de desarrollo, determinar los requisitos del software y realizar un plan de trabajo.
<b>Acción</b>	Desarrollar el nuevo software, tomando en cuenta los requisitos identificados previamente, los lineamientos de diseño y de calidad de software.
<b>Evaluación</b>	Realizar las pruebas de funcionalidad e interfaz gráfica de usuario del nuevo software.
<b>Reflexión</b>	Presentar los resultados y los análisis de las pruebas realizadas.

### III-B. SCRUM

Es un marco de trabajo de procesos utilizado para gestionar el desarrollo de productos complejos. SCRUM muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de productos y las prácticas de desarrollo [12].

Adicionalmente a la utilización de la metodología SCRUM, se están incluyendo algunos artefactos de la metodología RUP [13], para así generar suficiente documentación durante el diseño y el desarrollo del nuevo software. La configuración de la metodología SCRUM, en conjunto con los artefactos seleccionados de la metodología RUP, se ilustra en la tabla 2.

TABLA 2. Configuración de los artefactos a utilizar de SCRUM y RUP

Artefactos SCRUM
<b>Pila del producto:</b> una lista de todas las tareas que se deben hacer durante el desarrollo.
<b>Pila del sprint:</b> el grupo de tareas que se deben realizar durante <i>sprint</i> .
<b>Incremento:</b> el producto final de cada <i>sprint</i> . Dicho producto debe ser funcional y permitir implementarse sin restricciones en un ambiente productivo.
Artefactos RUP
<b>Documento de visión:</b> describe el propósito y el alcance en alto nivel del producto.
<b>Glosario:</b> define la terminología empleada en los artefactos.
<b>Requerimientos no funcionales:</b> una lista que especifica los requerimientos que tienen un impacto significativo en la arquitectura y en la satisfacción del usuario.
<b>Modelo de casos de uso:</b> describe los requerimientos funcionales del software en términos de actores y casos de uso.

## IV. TECNOLOGÍAS Y RECURSOS

### IV-A. Tecnologías

1) *Qt*: es un *framework* de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para sistemas de escritorio, sistemas integrados y sistemas móviles [16]. Se está utilizando la versión *open source* de este *framework* para el desarrollo del nuevo software.

2) *Visual Studio*: es un entorno integrado de desarrollo (*IDE*) para crear aplicaciones en varias plataformas, como Windows, Android y iOS [17]. Se está utilizando la versión gratuita de este *IDE* para desarrollar una librería escrita en Visual Basic .NET, que actúa como intermediaria entre el archivo MSXE.ocx y el *framework* Qt, para así utilizar las características del MiniScan XE Plus en el nuevo software.

3) *PostgreSQL*: es un sistema *open source* multiplataforma de bases de datos relacionales [18]. Posee más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura que se ha ganado una fuerte reputación por confiabilidad, integridad de datos y correctitud. Este sistema se está utilizando para desarrollar y administrar la base de datos con la que opera el nuevo software.

4) *Gitlab*: es un servicio de control de versiones que ofrece alojamiento gratuito, tanto público como privado, de repositorios para proyectos [19]. Se está utilizando la versión en línea de este servicio para llevar un control de versiones durante el desarrollo del proyecto.

5) *QCustomPlot*: es un *widget open source* para Qt que permite realizar el trazado y la visualización de datos [20]. Este *widget* se está utilizando en el nuevo software para visualizar curvas asociadas con los datos espectrales proporcionados por el MiniScan XE Plus.

6) *QtXlsx*: es una librería *open source* para Qt que permite leer y escribir archivos con extensión *xlsx* [21]. Esta librería está siendo utilizada para implementar en el nuevo software la opción de exportar los resultados de una muestra a un archivo portátil.

### IV-B. Recursos

1) *Adaptador RS232-USB*: es un cable adaptador que habilita la comunicación de dispositivos que utilizan puerto serial con computadoras que disponen de puertos USB, creando puertos COM virtuales con las mismas mientras se realiza dicha comunicación [15]. Este cable es utilizado como adaptador para el cable de comunicación RS232 DB-9 hembra a RJ-45 del MiniScan XE Plus [4], habilitando su utilización en computadoras que no poseen puerto serial.

2) *MiniScan XE Plus OCX Kit (MSXE.ocx)*: es un archivo diseñado por la empresa HunterLab para controlar y/o realizar mediciones con el MiniScan XE Plus. Su objetivo es proporcionar a los desarrolladores un componente reutilizable de software que de acceso a las características comúnmente utilizadas por el instrumento [14].

3) *MiniScan XE Plus*: es un instrumento de medición del color, creado por la empresa HunterLab, de diseño compacto y portátil [14], que emplea la técnica de ERD, y el cual se puede apreciar en la figura 1. Este instrumento mide la cantidad de luz que refleja una muestra dentro del espectro de luz que va desde 400 hasta 700 nanómetros, generando como resultado

31 puntos espectrales dentro de ese rango, que son el insumo principal del nuevo software.

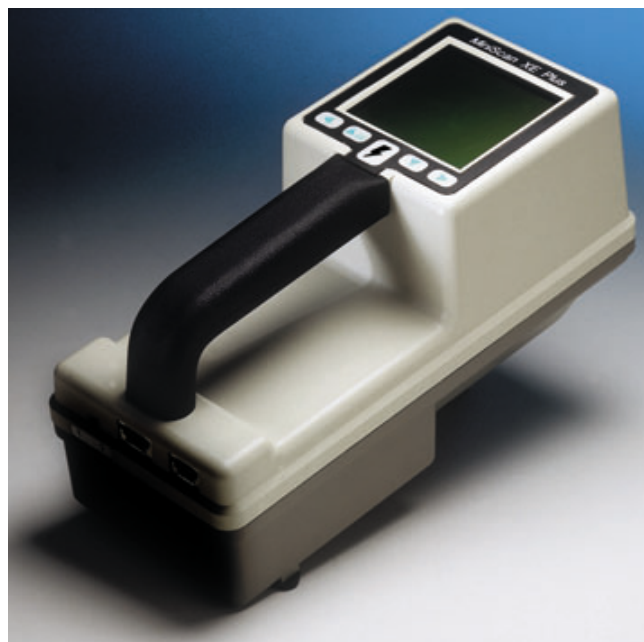


FIGURA 1. MiniScan XE Plus

## V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

### V-A. Resultados

Para establecer la comunicación entre el MiniScan XE Plus y el nuevo software, se recurrió a la documentación del instrumento, en la cual se describe el MSXE.ocx [14], que es un archivo que implementa las funciones comúnmente utilizadas por dicho instrumento. Se contactó al personal de soporte técnico de HunterLab por correo electrónico, para solicitarle el código fuente de dicho archivo y la documentación relativa a su utilización que se pudiera proporcionar para la investigación.

Si bien el personal no compartió el código fuente del archivo, sí envió la documentación solicitada y un ejemplo de su uso escrito en Visual Basic for Applications (VBA). Primero se intentó cargar el archivo y utilizarlo directamente en Qt; sin embargo, ocurría un error de compatibilidad de datos al invocar algunas de sus funciones. La solución a este problema fue desarrollar una librería escrita en Visual Basic .NET, con la cual se pueden invocar todas las funciones de este archivo sin problema alguno.

Así pues, por medio del cable adaptador RS232-USB, y empleando la librería escrita en Visual Basic .NET, se logró establecer la comunicación entre el software que está siendo desarrollado en Qt y el MiniScan XE Plus, por medio del archivo MSXE.ocx. Hasta el momento, el nuevo software en desarrollo es capaz de conectar el MiniScan XE Plus, desconectarlo, estandarizarlo (empleando una trampa de luz y una baldosa de cerámica blanca), realizar la medición de una muestra, y, por último, representar los 31 puntos espectrales obtenidos de la medición en una de curva de reflectancia difusa.

En la figura 2 se puede apreciar la función de visualización de la curva de reflectancia difusa en el HLUS, en donde se puede apreciar que el diseño de la interfaz gráfica de usuario es obsoleto. Dicha interfaz está en inglés y la visualización de la curva no resalta los 31 puntos espectrales ni muestra con exactitud cada uno de los valores de longitud de onda, ni los porcentajes de reflectancia que representan.

Ahora bien, en la figura 3 se puede observar la función de visualización de la curva de reflectancia difusa del nuevo software en desarrollo, a partir de los 31 puntos espectrales. En contraste con las observaciones realizadas al HLUS en la figura 2, la interfaz gráfica de usuario del nuevo software posee un diseño actual, está en español, y por último resalta los 31 puntos espectrales, mostrando con exactitud los 31 valores de longitud de onda y los porcentajes de reflectancia que representan.

Por último, este nuevo software será modificable y extensible, razones por las cuales será un software libre y, por ende, permitirá agregar, modificar y quitar funciones. Lo mismo se aplicará para la librería que intermedia en la comunicación con el MSXE.ocx.

## V-B. Conclusiones

Si bien el nuevo software está en una fase temprana de desarrollo, en comparación con el HLUS se puede apreciar que provee de información más detallada sobre la curva de reflectancia difusa, lo que sumado al resto de las funciones será de gran utilidad para los estudios dermatológicos. Además, el empleo del *framework* Qt en el desarrollo del nuevo software permite su ejecución en sistemas operativos Windows actuales, lo que garantiza su uso en los equipos disponibles en el CIMBUC.

En definitiva, se concluye que el nuevo software cumplirá con el objetivo de ajustarse a las necesidades de los dermatólogos y demás investigadores, y garantizará un mejor aprovechamiento del MiniScan XE Plus.

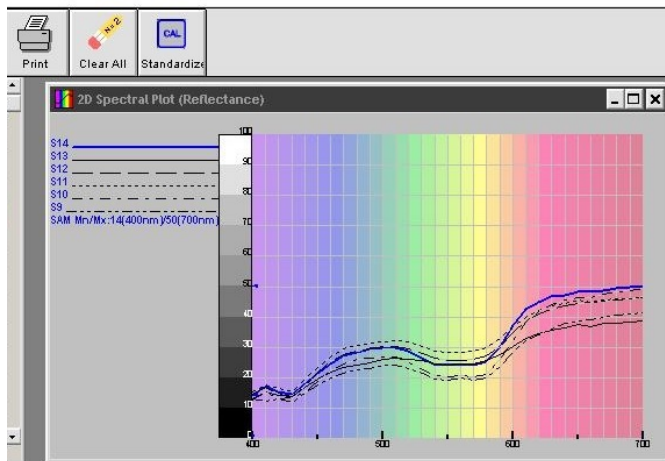


FIGURA 2. Curva de reflectancia del HunterLab Universal Software

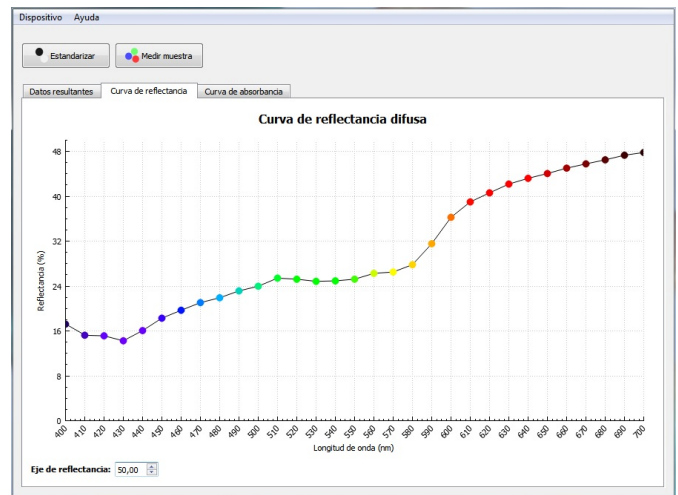


FIGURA 3. Curva de reflectancia del software en desarrollo

## AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de investigación se está llevando a cabo gracias a la tutoría de los profesores Harold Vasquez y Patricia Guerrero, la orientación del profesor Freddy Narea, la colaboración del profesor Aarón Muñoz, al apoyo de todo el equipo de investigadores que hace vida en el CIMBUC, y finalmente a la ayuda proporcionada por el personal de soporte técnico de HunterLab.

«El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir» - Albert Einstein.

## REFERENCIAS

- [1] K. S. Bersha, *Spectral Imaging And Analysis Of Human Skin*. Universidad del Este de Finlandia, 2010.
- [2] A. D. Pérez, *Estudio de la Reflexión Óptica Difusa en Tejido Biológico*. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, 2012.
- [3] Hunter Associates Laboratory, *HunterLab, The World's true measure of color*. <http://www.hunterlab.com/about-us.html>.
- [4] *Universal Software Versions 4.10 and Above User's Manual*. Reston, Virginia: Hunter Associates Laboratory, 2001.
- [5] I. Sommerville, *Ingeniería del Software*, 7ma ed. Madrid, España: Pearson Education, 2005.
- [6] CIE, *Commission Internationale de l'Eclairage, International Commission on Illumination*. <http://www.cie.co.at/index.php>.
- [7] J. Wagner et al., *Comparing Quantitative Measures of Erythema, Pigmentation and Skin Response using Reflectometry*. *Pigment Cell Res*, 2002.
- [8] F. Narea et al., *Recuperación del coeficiente de absorción de la epidermis en la piel humana*. Sociedad Española de Óptica, 2015.
- [9] J. Schanda, *Colorimetry: Understanding the CIE system*. Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2007.
- [10] *Absorption spectrum*. (n.d.) Random House Kernerman Webster's College Dictionary. K Dictionaries LTD, 2010.
- [11] R. L. Baskerville, *Investigating Information Systems with Action Research*, vol 2. Atlanta, GA: Association for Information Systems, 1999.
- [12] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. <http://www.scrumguides.org/>.
- [13] P. Kroll y P. Kruchten, *The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the RUP*. Addison-Wesley, 2003.
- [14] *MiniScan XE Plus User's Guide Version 2.4*. Reston, Virginia: Hunter Associates Laboratory, 2006.

- [15] Magneto Tech Research, *USB to Serial adapters Wiki*. <http://www.usb-serial-adapter.org/>.
- [16] The Qt Company, *Qt, a Cross-Platform Framework for Application Development*. [https://wiki.qt.io/About\\_Qt](https://wiki.qt.io/About_Qt).
- [17] Microsoft, *Visual Studio Community, a fully-featured, extensible IDE*. <https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-community-vs>.
- [18] PostgreSQL, *PostgreSQL: The world's most advanced open source database*. <http://www.postgresql.org/about>.
- [19] Gitlab, *Gitlab: Create, review, and deploy code together*. <https://about.gitlab.com>.
- [20] QCustomPlot, *A Qt C++ widget for plotting and data visualization*. <http://www.qcustomplot.com/index.php/introduction>.
- [21] QtXlsx, *A Qt library to read and write excel files that can be used in any platform that Qt5 supported*. <http://www.qtxlsx.debao.me>.